

**DIMAR**

PRODUCT  
LINE

Intensive Care

# *DimAir Line*



**CASCHI ECO OBLÒ**  
*con valvola di sicurezza integrata*

# CASCHI ECO OBLÒ


con valvola di sicurezza integrata

**Casco Monopaziente per Supporto Respiratorio Non Invasivo in CPAP e BI-PAP a elevata compliance, completo di Valvola di Sicurezza Bidirezionale integrata.**

- Accesso rapido e diretto al paziente tramite Oblò rimovibile con chiusura ermetica a vite.
- L'Oblò facilita le procedure di nursing, alimentazione e weaning senza ricorrere alla rimozione del dispositivo.
- Oblò dotato di valvola antisofoffamento BI-DIREZIONALE. In caso di mancata erogazione del gas di ventilazione, permette al paziente di scambiare aria con l'esterno (ingresso e uscita). Il dispositivo si attiva automaticamente quando all'interno del casco la pressione è inferiore a 2,5 cmH<sub>2</sub>O circa.
- Disponibile la versione con valvola completa di Membrana Filtrante con efficienza >99%, idonea a limitare la diffusione di micro organismi nell'ambiente.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Monopaziente
- Oblò a tenuta pneumatica con valvola antisofoffamento bidirezionale
- Realizzato in materiale plastico biocompatibile
- Bretelle ascellari morbide e flessibili con protezione in materiale igienico antibatterico CoolMax®
- Raccordi:
  - 4 raccordi ISO sull'anello rigido
  - 2 raccordi laterali, 22M, 22F ISO
- 2 asole di ritenuta sulla sommità del casco per un fissaggio alternativo/aggiuntivo
- Latex e PHT Free

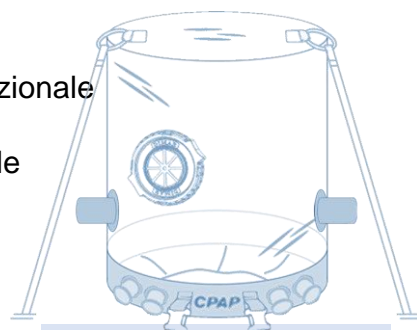

L'utilizzo del fissaggio alternativo/aggiuntivo "eyelet" previene i decubiti alle ascelle



## VANTAGGI

- Efficace, pratico e confortevole
- Rapido accesso del paziente
- Possibilità di eseguire manovre di nursing, alimentazione e weaning senza togliere il casco
- Valvola antisofoffamento BI-DIREZIONALE
- Versione con materiale filtrante integrato nella valvola idonea a limitare la diffusione di micro organismi

## RIFERIMENTI:

- In confezione Singola
- Confezione multipla da 5 pezzi
- Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati e su specifica richiesta.

Valvola Bidirezionale CON membrana filtrante	Valvola Bidirezionale	MISURA	Circonferenza collo (cm)	RDM	CND/EMDN
500/6168	500/6061	XXS	23 ÷ 27	2683503	R0301010401
500/6169	500/6062	XS	27 ÷ 31		
500/6170	500/6063	S	31 ÷ 35		
500/6171	500/6064	M	35 ÷ 39		
500/6172	500/6065	L	39 ÷ 43		
500/6173	500/6066	XL	43 ÷ 47		
500/6174	500/6067	XXL	47 ÷ 51		
500/6175	500/6068	3XL	≥ 51		

\*+/- tolleranze dimensionali escluso collare e testa paziente



**HMC Premedical S.p.A**

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I  
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546



0425