

DIMAR

PRODUCT
LINE

Ambulance
Emergency

DimAir Line



MASCHERA

EASY VENT EMERGENCY

MASCHERA EASY VENT EMERGENCY


Sistema CPAP "E.V.E. Mask" per la somministrazione di miscele aria/ossigeno in tecniche CPAP ad alto flusso su pazienti ipossiemici in edema cardiogeno o insufficienza respiratoria acuta (IRA). Dotato di dispositivo Venturi in grado di erogare fino a 120 Lt/min.

Kit leggero e pratico, utilizzabile in Ambulanza, Pronto Soccorso e nei reparti ospedalieri, in presenza di un'unica bombola di ossigeno o flussimetro.

La regolazione del flusso determina il valore di PEEP somministrato al paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Venturi monouso integrato ad alta efficienza
- Maschera con cuscinetto anatomico regolabile
- Manometro integrato per il costante controllo e regolazione della pressione applicata
- Raccordo Luer M per la somministrazione di ossigeno o controllo della EtCO₂
- Tubo alimentazione ossigeno di 2 metri
- Nucale regolabile, applicazione e fissaggio rapidi
- Latex e DEHP Free

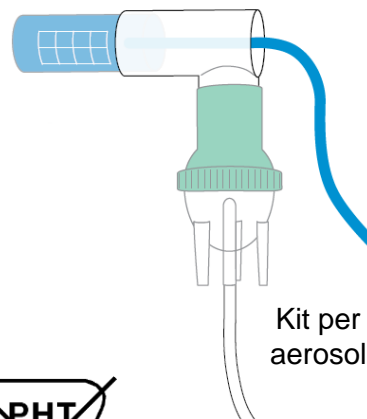

VANTAGGI

- Estremamente Rapido, Pratico ed Efficace
- Monitoraggio continuo della pressione applicata anche in presenza di perdite
- L'efficacia del sistema consente la somministrazione di pressioni fino a circa 20 cmH₂O
- Ridotto consumo di ossigeno per una maggiore autonomia della bombola
- Per il funzionamento è sufficiente una sola fonte di ossigeno quale flussimetro o bombola
- Possibilità di somministrare aerosol tramite apposito kit (cod. 700/5066)

RIFERIMENTI:

CODICE	MISURA	RDM	CND/EMDN
700/6413	PED/ADULTI (S/M)	2683358	R0301010202
700/6414	ADULTI (L/XL)		

- In confezione Singola – Confezione multipla da 10 pezzi
- Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati

TABELLA RENDIMENTI

Flusso/Pressioni/FiO₂ Flusso ottenuto 60 Lt circa

Flusso Lt./min	PEEP approx	Conc. O ₂ approx
5	5	40%
6	7	40%
7	9	40%
8	11	40%
9	14	40%
10	16	40%
11	19	40%



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546

