


**DIMAR**

Medical Devices

# DimAir Line

## EASY FLOW MONITOR

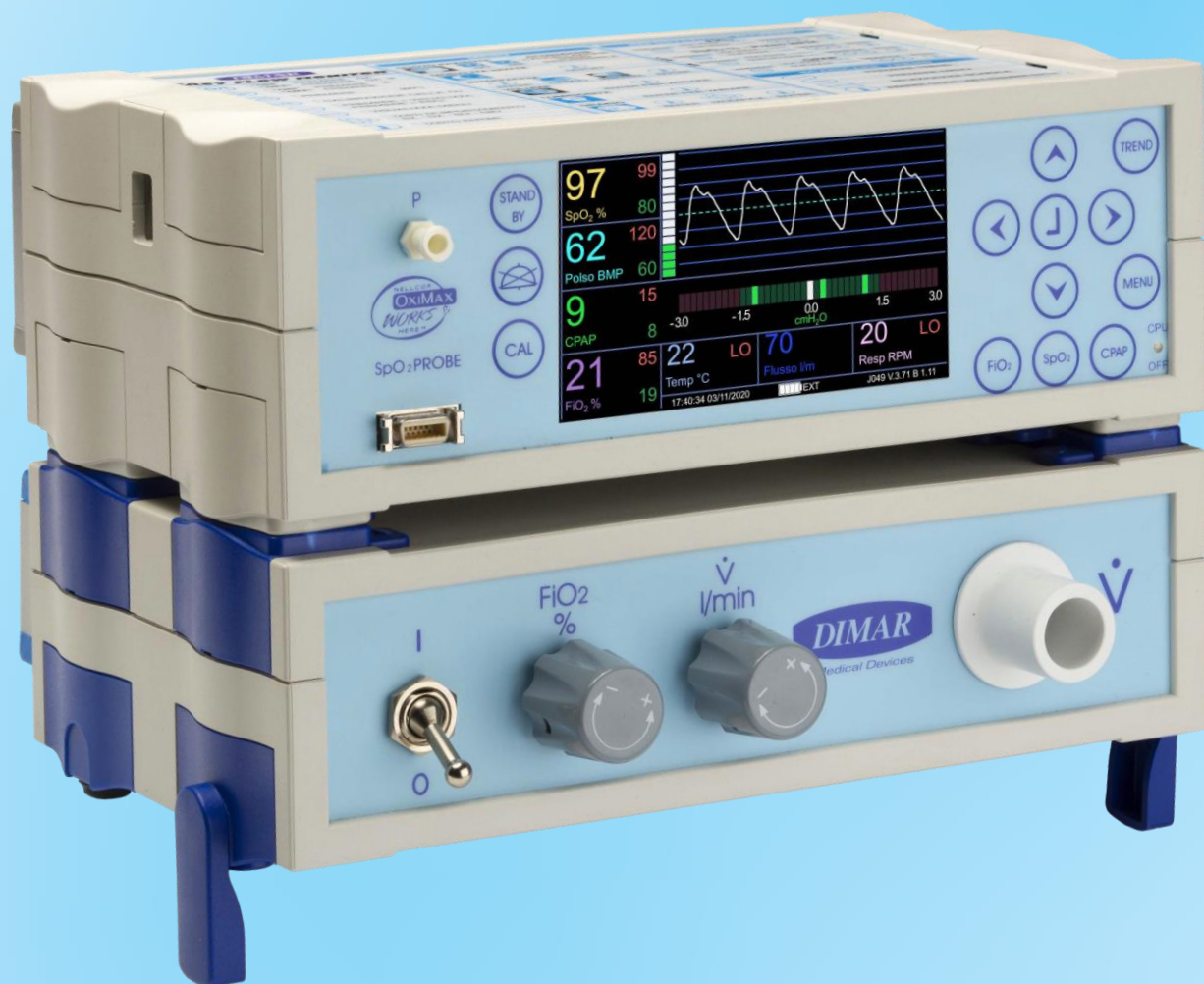

**GENERATORE DI FLUSSO CON MONITOR**

# GENERATORE DI FLUSSO CON MONITOR

## EASY FLOW MONITOR

Generatore Venturi per la somministrazione di tecniche CPAP in pazienti collegati a maschere o caschi.

Portata regolabile da 0 a 200 Lt/min. Frazione inspiratoria ossigeno (FiO<sub>2</sub>) regolabile dal 30 al 100%.

Dotato di monitoraggio e memorizzazione di 48 ore dei principali parametri funzionali del paziente e CPAP, consente il trasferimento dei dati su un normale PC in Excel .

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Memorizzazione dei parametri misurati entro 48 ore.
- Possibilità di scaricare e trasferire i parametri rilevati tramite porta USB.
- Valori di portata e **FiO<sub>2</sub>** regolabili.
- Gli allarmi visivi e acustici possono essere impostati al minimo e al massimo.
- Alimentazione 15 V e batteria (autonomia di supporto 5 ore).
- Possibilità di utilizzo in pazienti intubati e non invasivi.
- Possibilità di scegliere l'uso con casco o maschera.
- Raccordo di uscita ISO 22M.
- Software aggiornabile tramite porta USB.

### PARAMETRI RILEVATI:

- Pulsossimetria SpO<sub>2</sub> % - BPM.
- Pressione CPAP-PEEP cmH<sub>2</sub>O.
- Frazione inspiratoria Ossigeno **FiO<sub>2</sub>** %.
- Temperatura del gas in °C.
- Portata erogata l/m.
- Frequenza respiratoria rpm.

---

### DIMAR S.P.A.

Via G. Galilei, 6 41036 Medolla -MO- I  
Tel: +39 0535 611336 Fax: +39 0535 611328  
Mail: [info@dimarspa.com](mailto:info@dimarspa.com)

