

DIMAR
Medical Devices

DimAir Line




CASCHI CPAP ECO OBLÒ
*Con valvola di sicurezza bidirezionale integrata,
con filtro antimicrobico >99%*

Casco Monopaziente per Supporto Respiratorio Non Invasivo in CPAP e BI-PAP a elevata compliance, completo di Valvola di Sicurezza Bidirezionale integrata.

- Accesso rapido e diretto al paziente tramite oblò rimovibile con chiusura ermetica a vite.
- L'Oblò facilita tutte le procedure di nursing, alimentazione e weaning senza ricorrere alla rimozione del dispositivo.
- L'Oblò integra una valvola antisoffocamento BI-DIREZIONALE che permette al paziente, in caso di mancata erogazione del gas di ventilazione, di scambiare aria con l'esterno (ingresso e uscita). Il dispositivo si attiva automaticamente quando all'interno del casco la pressione è inferiore a 2,5 cmH₂O circa.
- La valvola è completa di Membrana Filtrante con efficienza >99%, idonea a limitare la diffusione di micro organismi nell'ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Monopaziente.
- Oblò a tenuta pneumatica con valvola antisoffocamento bidirezionale completa di materiale filtrante.
- Realizzato in materiale plastico biocompatibile.
- Bretelle morbide e flessibili con protezione in materiale igienico antibatterico CoolMax®.
- Raccordi:
 - 4 raccordi 22M ISO sull'anello rigido.
 - 2 raccordi laterali, 22M, 22F ISO.
- 2 asole di ritenuta sulla sommità del casco per un fissaggio alternativo/aggiuntivo.
- Latex e PHT Free.

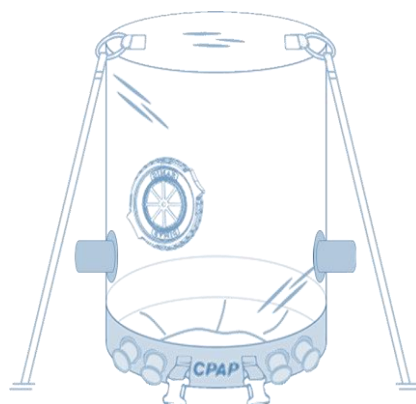

L'utilizzo del fissaggio alternativo/aggiuntivo "eyelet" previene i decubiti alle ascelle

VANTAGGI

- Efficace, pratico e confortevole.
- Rapido accesso del paziente.
- Possibilità di eseguire nursing, alimentazione e weaning senza togliere il casco.
- Valvola antisoffocamento BI-DIREZIONALE per la sicurezza del paziente.
- Materiale filtrante integrato nella valvola idonea a limitare la diffusione di micro organismi nell'ambiente.

RIFERIMENTI:

CODICE	MISURA	Circonferenza collo (cm)	Volume interno* (Lt - testa esclusa)	RDM	CND
500/6168	XXS	23 ÷ 27	9	2418320	R0301010401
500/6169	XS	27 ÷ 31	9		
500/6170	S	31 ÷ 35	9		
500/6171	M	35 ÷ 39	10		
500/6172	L	39 ÷ 43	10		
500/6173	XL	43 ÷ 47	11		
500/6174	XXL	47 ÷ 51	11		
500/6175	3XL	≥ 51	11		

*+/- tolleranze dimensionali escluso collare e testa paziente

- In confezione Singola
- Confezione multipla da 5 pezzi
- Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati e su specifica richiesta.

DIMAR S.P.A.

Via G. Galilei, 6 – 41036 Medolla – MO – I
Tel: +39 0535 611336 Fax: +39 0535 611328
Mail: info@dimarspa.com

