




Medical Devices

# DimAir Line

# LA RIVOLUZIONE del Casco

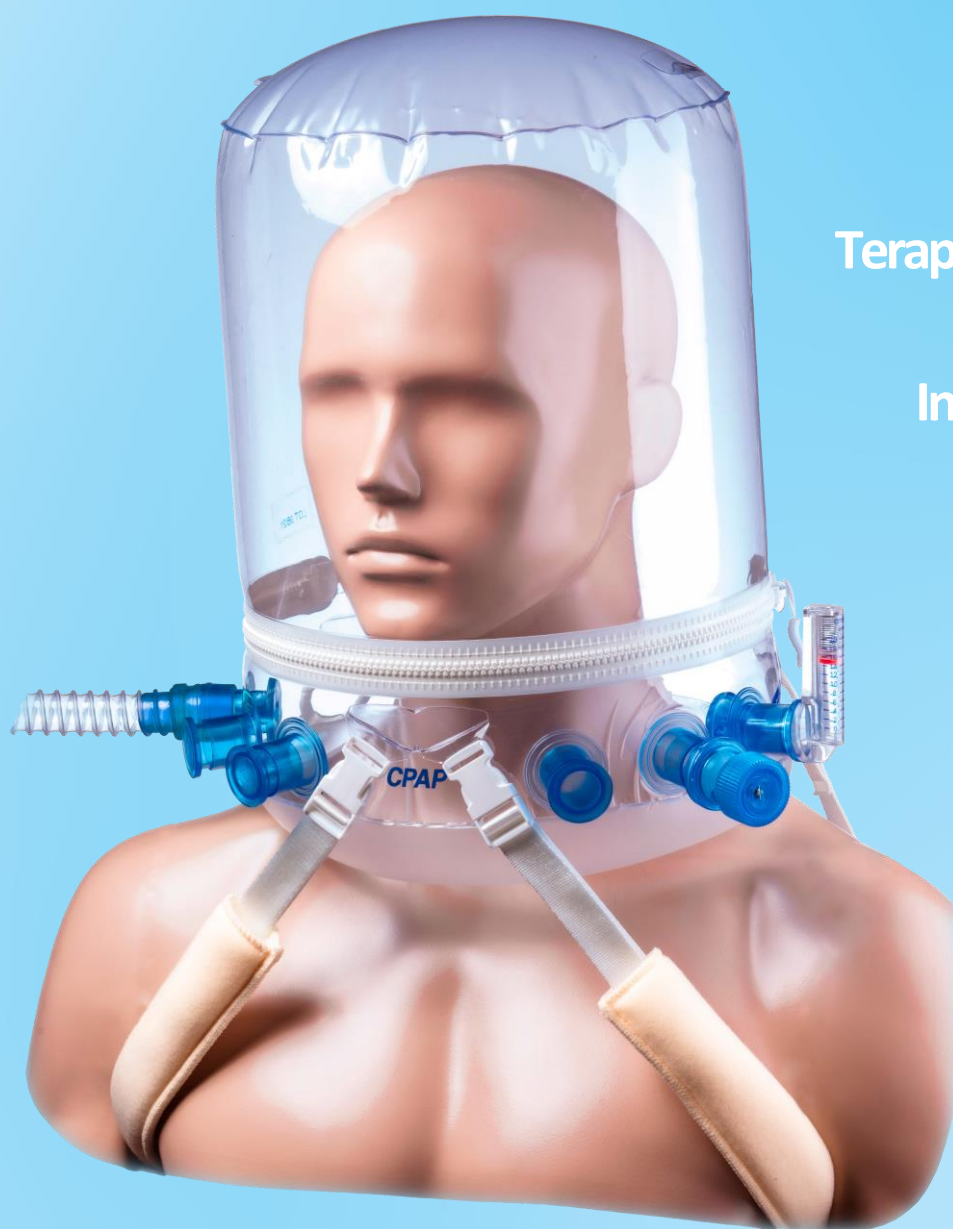

Terapia intensiva  
Ematologia  
Infettivologia

## CASCHI ZIP

**Casco monopaziente per ventilazione meccanica non invasiva (NPPB), utilizzabile anche per PSV-ASB, BIPAP e CPAP. Dotati di cerniera ermetica, consentono un accesso rapido e facile al paziente. Comodo e pratico.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Chiusura ermetica con cerniera.
- Realizzato in materiale plastico biocompatibile.
- 2 occhielli di fissaggio sulla parte superiore del casco per un fissaggio alternativo/aggiuntivo.
- Connessioni simmetriche Dx/Sx per un collegamento comodo e semplice con l'apparecchiatura posta su qualsiasi lato.
- Accesso sigillato da 3 a 19 mm.
- Bretelle morbide e flessibili per prevenire il decubito ascellare complete di protezione in materiale antibatterico igienico CoolMax®.
- Connettori ISO 22M, 22F
- Latex e PHT Free.



## VANTAGGI:

- Accesso rapido alla faccia del paziente.
- In uso in PSV-ASB, il fissaggio "ad occhiello" migliora la risposta al trigger inspiratorio e la sincronicità paziente-ventilatore.
- Possibilità di eseguire nursing, alimentazione e svezzamento senza rimuovere il casco.
- L'ingresso e l'uscita del gas possono essere invertiti o collegati dallo stesso lato; quindi è anche possibile posizionare il paziente su un lato.

### NIMV 6R ZIP

Casco per ventilazione non invasiva (NPPB), utilizzabile in PSV-ASB, BIPAP e CPAP.

6 connettori ISO posizionati sull'anello rigido per una maggiore efficacia, praticità e comfort.

La connessione all'anello rigido riduce i tempi di risposta dei trigger <0.1".



CODICE	TAGLIA	RDM	CND
600/5586	XXS	2418335	R0301010402
600/5234	XS		
600/5235	S		
600/5236	M		
600/5237	L		
600/5238	XL		
600/5239	XXL		
600/5582	3XL		

### COMFORT CPAP ZIP

Casco per CPAP. Privo di anello rigido, previene il decubito alla nuca e alle spalle del paziente. L'elevato comfort consente di essere utilizzato per lunghi periodi in reparti ospedalieri.



CODICE	TAGLIA	RDM	CND
500/5579	XXS	2418320	R0301010401
500/5441	XS		
500/5442	S		
500/5443	M		
500/5444	L		
500/5445	XL		
500/5446	XXL		
500/5568	3XL		

### COMFORT NEO-PED ZIP

Caschi CPAP in pazienti neonatali da 3 a 5 Kg. e pediatrici da 5 a 15 Kg.

Privo di anello rigido, previene il decubito alla nuca del paziente. Patella in materiale igienico antibatterico CoolMax®.



CODICE	TAGLIA	PESO	RDM	CND
500/5447	NEO	3 – 5 Kg	2418320	R0301010401
500/5448	PED	5 – 15 Kg		

- Confezione singola.
- Confezione multipla da 5 pezzi.
- Possibilità di creare modelli, versioni e confezioni personalizzate su richiesta.

## DIMAR S.P.A.

Via G. Galilei, 6 41036 Medolla -MO- I  
Tel: +39 0535 611336 Fax: +39 0535 611328  
Mail: [info@dimarspa.com](mailto:info@dimarspa.com)

