


DIMAR

Medical Devices

DimAir Line

Ambulanza

Pronto Soccorso

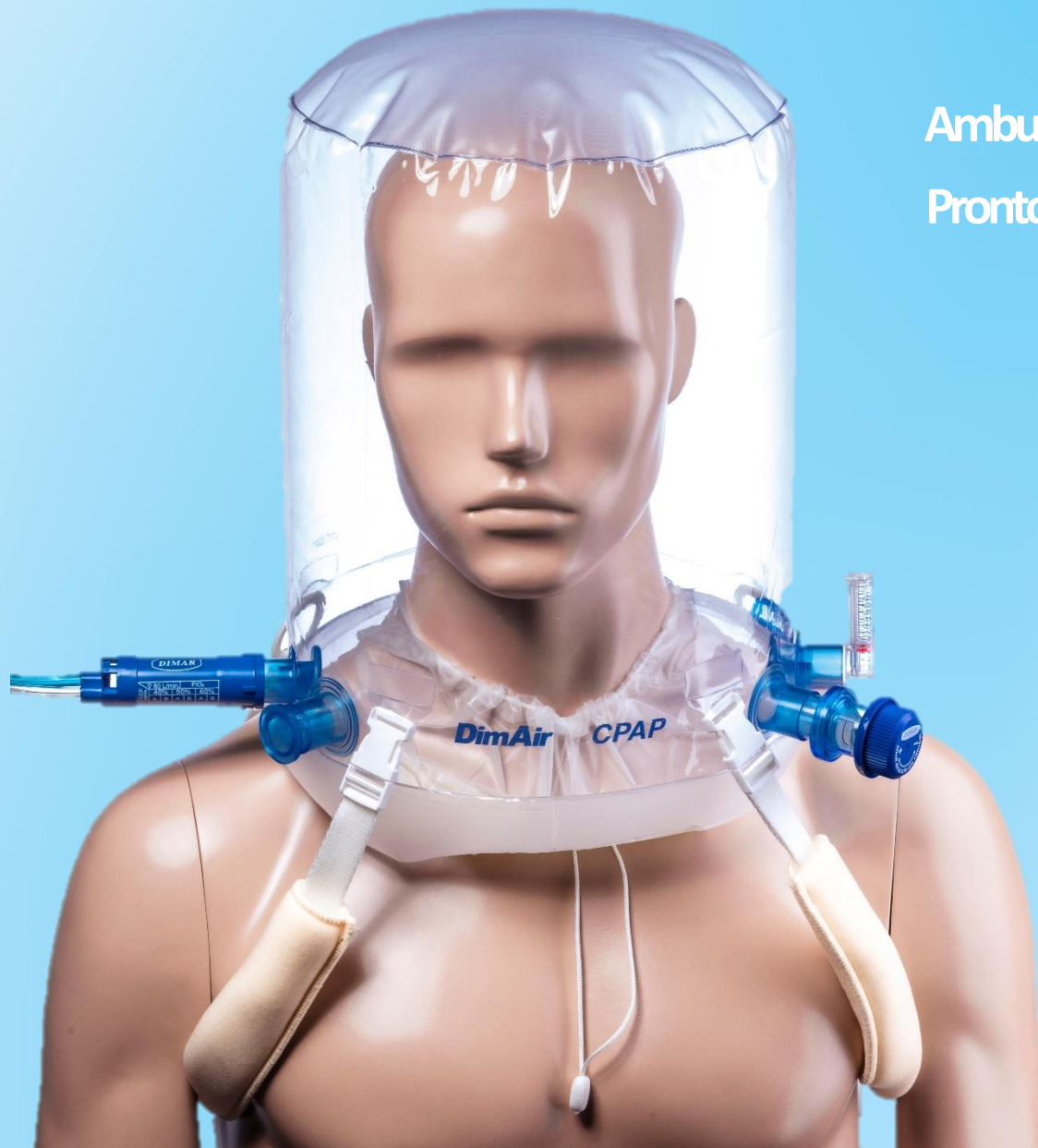

CPAP COMFORT COULISSE


AMBULANZA, 118, EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO

Casco monopaziente per il trattamento in emergenza di insufficienze respiratorie acute in CPAP. Dotato di chiusura rapida a “Coulisse”, può essere applicato rapidamente da un solo operatore.

Misura unica, assicura la tenuta pneumatica su pazienti di qualsiasi taglia. In confezione ridotta per un minimo ingombro in ambulanza. Fornito del generatore venturi Easy Vent ad alta efficacia, valvola PEEP regolabile e manometro di controllo della pressione, viene collegato direttamente alla bombola di Ossigeno per la somministrazione di CPAP in pazienti con Edema Cardiogeno direttamente dal domicilio del paziente. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monotaglia
- Chiusura a “Coulisse”
- Generatore venturi, valvola PEEP e manometro già inseriti per un rapido uso
- Bretelle morbide con aggancio rapido
- Realizzato in materiale plastico biocompatibile
- Monopaziente
- Latex e PHT Free

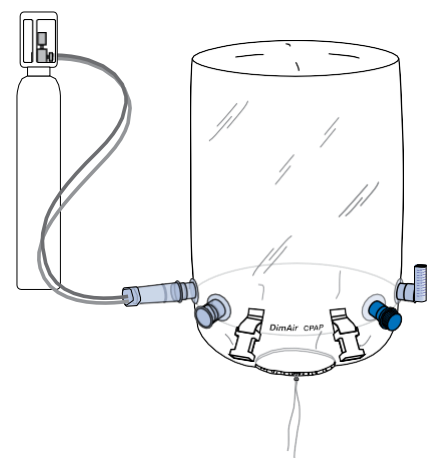

VANTAGGI:

- Rapida manovra di posizionamento, apertura e chiusura
- Posizionabile da un solo operatore
- Rapida pressurizzazione delle vie respiratorie
- Applicabile a pazienti di qualsiasi taglia
- Confezione “pocket” a ingombro ridotto, trova collocazione in qualsiasi spazio
- Pratico ed efficace
- Ottimo rapporto qualità/prezzo

CODICE	TAGLIA	Volume Interno Lt.	RDM	CND
500/8612I	UNICA	15,7 Litri	2418320	R0301010401

- In confezione Singola
- Confezione multipla da 5 pezzi

Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati e su specifica richiesta.



DIMAR S.P.A.

Via G. Galilei, 6 41036 Medolla -MO- I
 Tel: +39 0535 611336 Fax: +39 0535 611328
 Mail: info@dimarspa.com

