


DIMAR
Medical Devices

DimAir Line

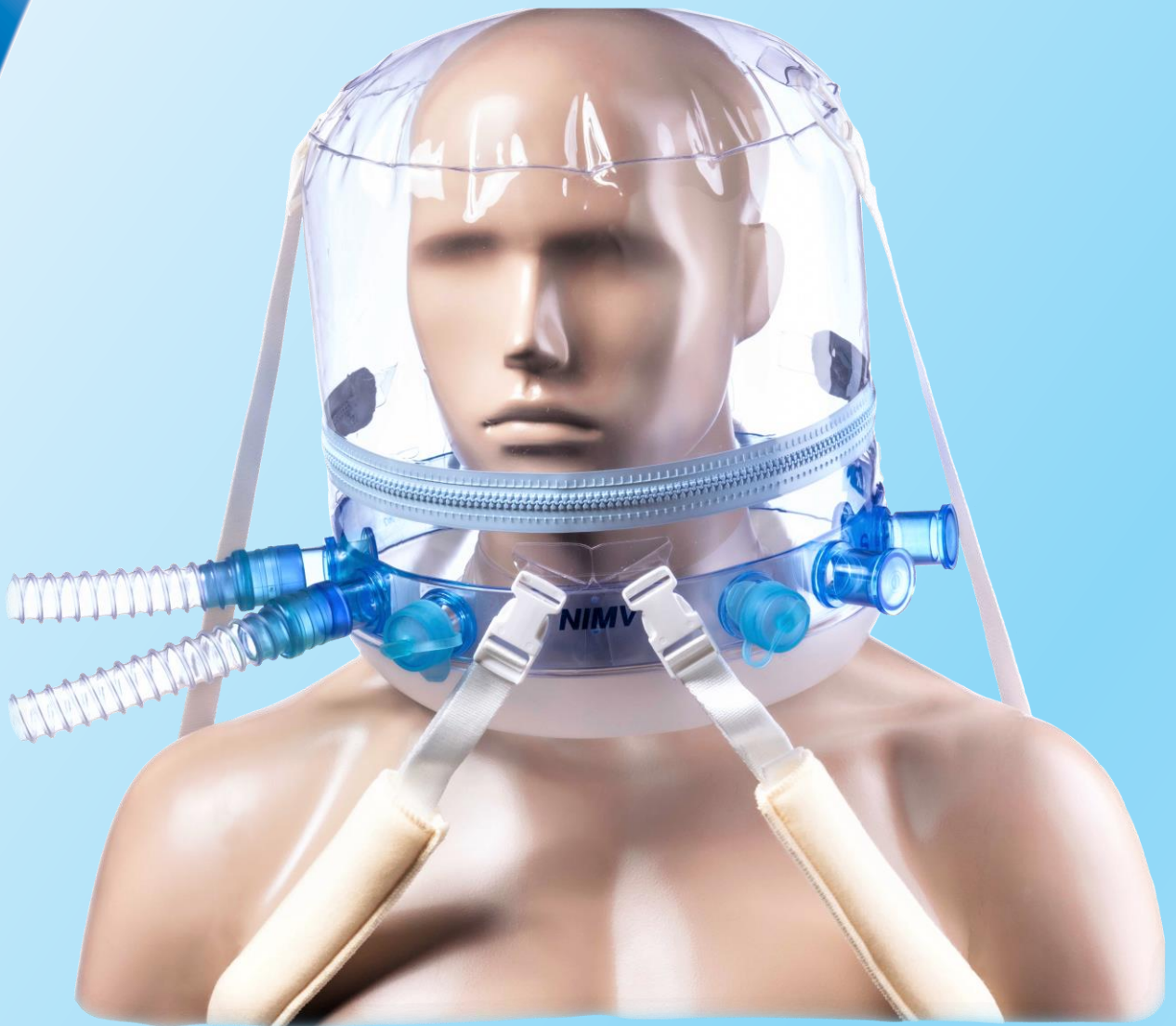

CASCHI NIMV

Casco Monopaziente per Ventilazione Meccanica Non Invasiva, utilizzabile anche in CPAP e BI-PAP per lo svezzamento da ventilatore, sia su pazienti adulti che bambini. Caratterizzato dalla presenza di 6 raccordi ISO posti direttamente sull'anello rigido, offre maggior EFFICACIA, PRATICITÀ e COMFORT. La versione dotata di cerniera a tenuta pneumatica consente un rapido e agevole accesso al paziente.


EFFICACIA Il collegamento all'anello rigido riduce i ritardi nel tempo di risposta del trigger.

PRATICITÀ La doppia raccorderia simmetrica DX e SX consente un pratico e agevole collegamento con le apparecchiature poste su qualsiasi lato.

COMFORT La connessione tra il casco e i tubi, direttamente sull'anello rigido, rende più confortevole la diffusione dei gas e riduce il rumore interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Monopaziente.
- Cerniera di apertura a tenuta pneumatica*.
- Realizzato in materiale plastico biocompatibile.
- Bretelle morbide e flessibili con protezione in materiale igienico antibatterico CoolMax®.
- 6 raccordi simmetrici Dx e Sx.
- 2 asole di ritenuta sulla sommità del casco per un fissaggio alternativo/aggiuntivo.
- Raccorderia ISO 22M, 22F.
- Latex e PHT Free.

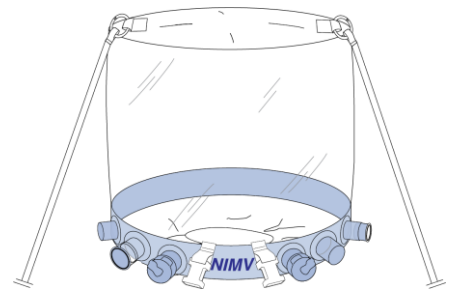

L'utilizzo del fissaggio alternativo/aggiuntivo "eyelet" previene i decubiti alle ascelle, migliora la risposta del trigger inspiratorio e il sincronismo paziente-ventilatore

VANTAGGI

- Efficace, pratico e confortevole.
- Ritardo di risposta del trigger < 0,1".
- Rapido accesso al viso del paziente.
- Possibilità di eseguire nursing, alimentazione e weaning senza togliere il casco.
- Entrata ed uscita dei gas possono essere invertite o connesse dallo stesso lato; in tal modo è anche possibile posizionare il paziente su un fianco.

RIFERIMENTI:

*+/- tolleranze dimensionali escluso collare e testa paziente

CODICE		TAGLIA	Circonferenza collo (cm)	Volume interno* (Lt - testa esclusa)	RDM	CND
Senza zip	* Con zip					
600/5585	600/5586	XXS	23 ÷ 27	9	2418335	R0301010402
600/5228	600/5234	XS	27 ÷ 31	9		
600/5229	600/5235	S	31 ÷ 35	9		
600/5230	600/5236	M	35 ÷ 39	10		
600/5231	600/5237	L	39 ÷ 43	10		
600/5232	600/5238	XL	43 ÷ 47	11		
600/5233	600/5239	XXL	47 ÷ 51	11		
600/5580	600/5582	3XL	≥ 51	11		

- In confezione Singola.
- Confezione multipla da 5 pezzi.
- Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati e su specifica richiesta.

DIMAR S.P.A.

Via G. Galilei, 6 – 41036 Medolla – MO – I
 Tel: +39 0535 611336 Fax: +39 0535 611328
 Mail: info@dimarsrl.com

