



DIMAR

Medical Devices



DimAir Line


NUCALE
INTERCAMBIABILE

5° PUNTO DI FISSAGGIO

VERSIONI
-MONOPAZIENTE
-RISTERILIZZABILE

MAGGIOR SPAZIO
PER IL NASO

PASSAGGIO
DEDICATO
PER SONDINO
NASOGASTRICO

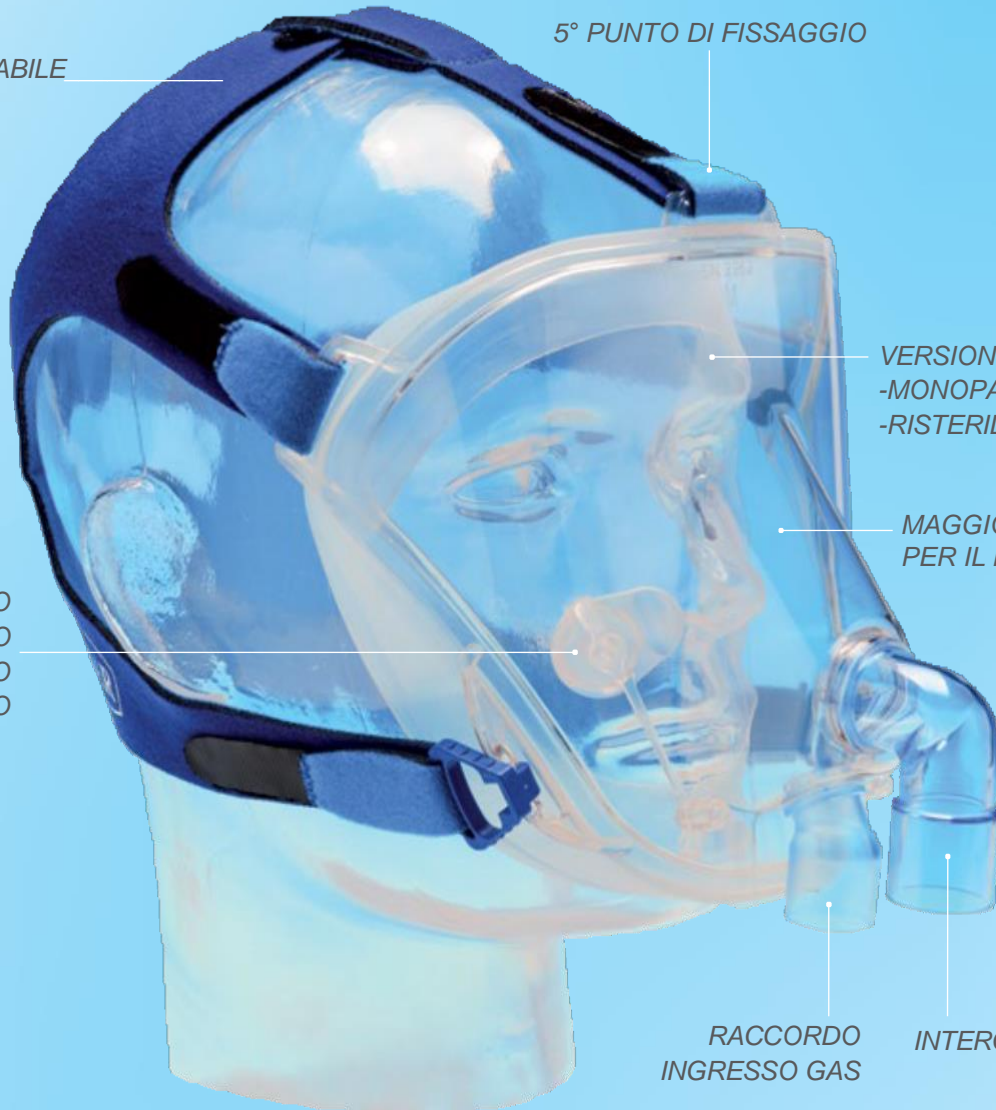

RACCORDO
INGRESSO GAS

RACCORDI
INTERCAMBIABILI


TOTAL FACE DIMAX ZERO

Maschera facciale tipo Total Face di nuova generazione per la Ventilazione Meccanica Non Invasiva in tecniche di PSV, BIPAP e CPAP. L'innovativa configurazione riduce a Zero il rebreathing di CO₂. Caratterizzata dalla presenza di 5 punti di fissaggio, ottimizza il sincronismo paziente/ventilatore e la distribuzione della pressione al volto, riducendo le perdite e migliorando il comfort. L'elevato volume dedicato al naso e la possibilità di sostituire il raccordo per trasformare la stessa maschera in Vented o Non Vented, rendono DiMax Zero l'interfaccia ideale per la Ventilazione Non Invasiva.

8 plus

- Zero rebreathing
- Attacchi
- Comfort
- Tenuta
- Praticità
- Versatilità
- Sicurezza
- Versioni

Fluido-Dinamica del CO₂ rebreathing nella maschera Total Face Standard rispetto alla DiMax Zero

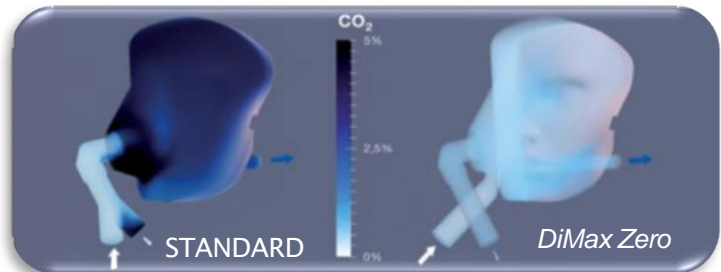

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Zero spazio morto.
- 5 punti di fissaggio.
- Maggior spazio per il naso.
- Accessi dedicati per SNG.
- Versioni monopaziente e risterilizzabile.
- Connettori intercambiabili:
22F Non Vented
22M Vented

VANTAGGI:

- Zero rebreathing di CO₂.
- Maggior sincronismo Paziente/Ventilatore.
- Maggior tenuta pneumatica.
- Maggior comfort per nasi prominenti.
- Minor trazione del nucale.
- Minori rischi di lesioni da contatto.
- Possibilità di passaggio per sondino nasogastrico e sonda per fibrobroncoscopia, senza perdite e interruzione della ventilazione.
- Versioni monopaziente e risterilizzabile in autoclave a 134°C - gas plasma - ETO.



Il 5° punto di fissaggio consente una maggior tenuta sulla fronte del paziente



Passaggio dedicato per sondino nasogastrico SNG



Raccordo "NonVented" per ventilatore bitubo



Configurazione per CPAP con generatore Venturi "Easy Vent"



Configurazione con ventilatore bitubo



Configurazione con ventilatore monotubo o generatore CPAP



DiMax Zero XS/Pediatrica

RIFERIMENTI:

MONOPAZIENTE**	TAGLIA	RDM	CND
700/6919	XS/PED	2418077	R0301010202
700/6828	SMALL		
700/6829	MEDIUM		
700/6830	LARGE		
700/6831	EXTRA LARGE		
700/7226	EXTRA EXTRA LARGE		

** In confezione singola

*** In confezione singola

RISTERILIZZABILE***	TAGLIA	RDM	CND
700/6920	XS/PED	2418608	R0301010202
700/6824	SMALL		
700/6825	MEDIUM		
700/6826	LARGE		
700/6827	EXTRA LARGE		
700/7225	EXTRA EXTRA LARGE		

Confezione multipla da 5 pezzi

DIMAR S.P.A.

Via G. Galilei, 6 41036 Medolla -MO- I
Tel: +39 0535 611336 Fax: +39 0535 611328
Mail: info@dimarspa.com

