

DimAir Line

Ambulanza
Emergenza
Reparti ospedalieri



MASCHERA EASY VENT

PEEP Regolabile

con FILTRO Antimicrobico >99%

MASCHERA EASY VENT

- Maschera "Easy Vent Mask" per la somministrazione di miscele aria/ossigeno in tecniche di CPAP
- Sistema Venturi in grado di erogare:
 - Flussi > 120 Lt/min
 - FiO₂ variabile da 0,30 a 1 (30% ÷ 100%)
- Kit leggero, pratico e di rapido impiego, può essere usato in Ambulanza, Pronto Soccorso e nei reparti di degenza ospedaliera, in presenza di una sola fonte di ossigeno quale impianto di distribuzione o bombola

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Monopaziente
- Venturi integrato ad alta efficienza
- Maschera con cuscinetto anatomico gonfiabile
- **Valvola PEEP regolabile da 0 a 20 cmH₂O con filtro antimicrobico**
- FiO₂ somministrabile da 0,30 a 1 (30% ÷ 100%)
- Manometro integrato per il costante controllo e regolazione della pressione applicata
- Raccordo Luer per la somministrazione di ossigeno o controllo della EtCO₂
- Tubi alimentazione ossigeno raccordabili al singolo o doppio flussimetro o a Bombola di O₂
- Nucale in silicone a rapida applicazione e fissaggio
- Latex e DEHP Free



- Efficacia ritenzione microbica > 99%
- Maggiore protezione per gli operatori
- Sistema compatto, Minimo Ingombro

VANTAGGI

- Dispositivo Pratico, Efficace e di Rapido posizionamento
- Monitoraggio continuo della pressione applicata anche in presenza di perdite
- L'efficacia del sistema consente la somministrazione di pressioni fino a 20 cmH₂O
- Ridotto consumo di ossigeno per una maggior autonomia della bombola
- Funziona con il solo ossigeno degli impianti di distribuzione o bombole
- Possibilità di somministrare aerosol tramite apposito KIT (700/5066)

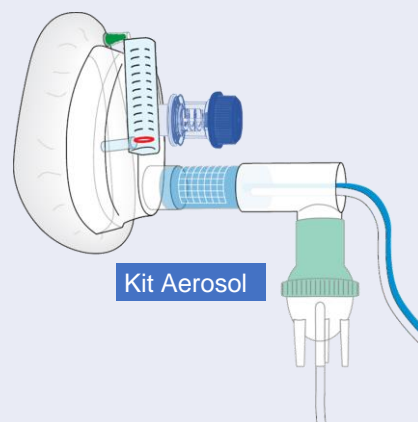

RIFERIMENTI:

CODICE	MISURA	RDM	CND
700/7111	S / M	2418636	R0301010202
700/7112	L		
700/7113	XL		

- In confezione Singola / Confezione multipla da 10 pezzi.
 - Possibilità di realizzare modelli, versioni e confezionamenti personalizzati e su specifica richiesta.

TABELLA RENDIMENTI:

Flusso/Pressioni/FiO₂ Flusso ottenuto 60 Lt circa

Conc. O ₂ % approx.	35%	40%	50%	60%
FLUSSI O ₂ Lt/min.	A	A + B	A + B	A + B
PEEP cm H ₂ O	5	5 10	6 18	5 26
	10	8 9 8	8 16	7 26
	15	10 11 6	10 14	9 26
FLUSSO OTTENUTO approx.	60 Lt/min.			

DIMAR S.P.A.

Via G. Galilei, 6 – 41036 Medolla – MO – I
 Tel: +39 0535 611336 Fax: +39 0535 611328
 Mail: info@dimarspa.com

