

DIMAR

PRODUCT LINE

Intensive Care Unit &
Hospital Departments

100%
MADE IN ITALY

DimAir Line

NUCALE
INTERCAMBIABILE

5° PUNTO
DI FISSAGGIO

VERSIONI
-MONOPAZIENTE
-RISTERILIZZABILE

PASSAGGIO
DEDICATO
PER SONDINO
NASOGASTRICO

MAGGIOR SPAZIO
PER IL NASO

RACCORDI
INTERCAMBIABILI

RACCORDO
INGRESSO GAS

TOTAL FACE
DIMAXZERO

MASCHERA TOTAL FACE "DIMAX ZERO"

Maschera Total Face di nuova generazione per la Ventilazione Meccanica Non Invasiva in tecniche di PSV, BIPAP e CPAP. L'innovativa configurazione riduce a Zero il rebreathing di CO₂. Caratterizzata dalla presenza di 5 punti di fissaggio, ottimizza il sincronismo paziente/ventilatore, riducendo le perdite e migliorando il comfort. L'ampio spazio per i nasi prominenti e la possibilità di sostituire il raccordo per trasformare la stessa maschera in Vented o Non Vented, rendono DIMAX ZERO l'interfaccia ideale per la Ventilazione Non Invasiva.

8 plus

- + Zero rebreathing
- + Raccordi
- + Comfort
- + Tenuta
- + Praticità
- + Versatilità
- + Sicurezza
- + Versioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Zero spazio morto.
- 5 punti di fissaggio.
- Maggior spazio per il naso.
- Accessi dedicati per SNG.
- Versioni monopaziente e risterilizzabile.
- Connettori intercambiabili:
22F Non Vented
22M Vented



VANTAGGI

- Zero rebreathing di CO₂.
- Maggior sincronismo Paziente/Ventilatore.
- Maggior tenuta pneumatica.
- Maggior comfort per nasi prominenti.
- Minor trazione del nucale.
- Minori rischi di lesioni da contatto.
- Possibilità di passaggio per sondino nasogastrico e sonda per fibrobroncoscopia, senza perdite e interruzione della ventilazione.
- Versioni monopaziente e risterilizzabile in autoclave a 134°C - gas plasma - ETO.

RIFERIMENTI:

MONOPAZIENTE**	TAGLIA	RDM	CND/EMDN
700/6919	XS/PED	2683312	R0301010202
700/6828	SMALL		
700/6829	MEDIUM		
700/6830	LARGE		
700/6831	EXTRA LARGE		
700/7226	EXTRA EXTRA LARGE		


RISTERILIZZABILE***	TAGLIA	RDM	CND/EMDN
700/6920	XS/PED	2683333	R0301010202
700/6824	SMALL		
700/6825	MEDIUM		
700/6826	LARGE		
700/6827	EXTRA LARGE		
700/7225	EXTRA EXTRA LARGE		

** In confezione singola

*** In confezione singola

Confezione multipla da 5 pezzi

Fluido-Dinamica del CO₂ rebreathing nella maschera Total Face Standard rispetto alla DIMAX ZERO

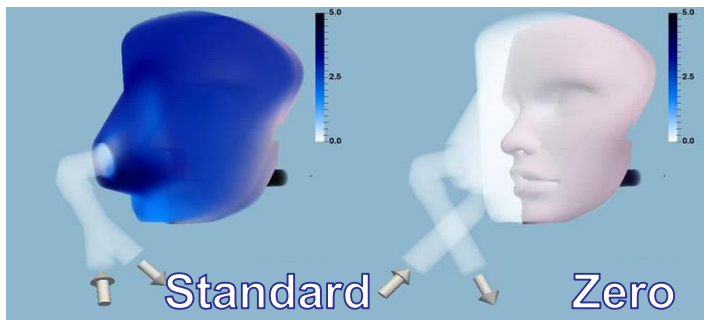

Il 5° punto di fissaggio consente una maggior tenuta e maggior comfort



Passaggio dedicato per SNG



Raccordo "NonVented" per ventilatore bitubo



Configurazione per CPAP con generatore Venturi "Easy Vent"



Configurazione con ventilatore bitubo



Configurazione con ventilatore monotubo o generatore CPAP



DIMAX ZERO XS/Pediatrica

Le immagini e i contenuti riprodotti sono indicativi e non vincolanti

5018/01 PRIMA EMISSIONE PER NUOVA CODIFICA



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3 – 41037 Mirandola – MO – I
Tel: +39 0535 22704 Fax: +39 0535 609546



0425